

コンバテック ストーマ装具

やわらかシリーズ

Soft

4
凸の高さ
mm

Flexible

7
凸の高さ
mm

エステーム™ やわらか凸 シャロー (消化管用) / やわらか凸 シャロー イレオ
エステーム™ やわらか凸 シャロー ウロ (尿路用)
エステーム™ やわらか凸 (消化管用) / やわらか凸 イレオ
エステーム™ やわらか凸 ウロ (尿路用)
やわらか平面 イレオ

「やわらかシリーズ」 フルラインアップ

様々な装具特性の違いが、症例状況に合わせた選択を可能とし、
日々のストーマケアを簡便にします。

“安心のストーマケアと快活な日常をサポート”





エスティーム™
やわらか凸 シャロー (消化管用)

NEW



やわらか凸
シャロー イレオ



エスティーム™
やわらか凸 シャロー ウロ (尿路用)



エスティーム™
やわらか凸 (消化管用)



やわらか凸
イレオ



エスティーム™
やわらか凸 ウロ (尿路用)



やわらか平面
イレオ

CONTENTS

やわらか凸 シャロー シリーズ

- エスティーム™ やわらか凸 シャロー (消化管用) ————— 06
- やわらか凸 シャロー イレオ ————— 07
- エスティーム™ やわらか凸 シャロー ウロ (尿路用) ————— 08

やわらか凸 シリーズ

- エスティーム™ やわらか凸 (消化管用) ————— 10
- やわらか凸 イレオ ————— 11
- エスティーム™ やわらか凸 ウロ (尿路用) ————— 12
- やわらか平面 イレオ ————— 13

高さ4mmと7mm、また硬さの異なる 2種の面板が、幅広いストーマケアへ適応し、 漏れのリスクを低減します。



凸型形状面板

(分類: 軟性凸面型面板)

やわらかく、しなやかな面板
による“軽い押さえ”が、
浅い皺やくぼみを幅広く補正

エステーム™ やわらか凸 シャロー (消化管用)
やわらか凸 シャロー イレオ
エステーム™ やわらか凸 シャロー ウロ (尿路用)



軟性凸面型面板

程よいコシと硬さにより、
深めの皺やくぼみのある
ストーマ近接部を
しっかり補正

エステーム™ やわらか凸 (消化管用)
やわらか凸 イレオ
エステーム™ やわらか凸 ウロ (尿路用)



初期タックの良さ、密着性・追従性に優れた「やわらか皮膚保護剤」(CPGbs系¹⁾/CPBS系²⁾)

優れた密着性 (タック力)

初期の密着性など、
タック力が高い

- 貼付直後より、刺激性の高い水様便から皮膚を守ります
- ストーマ近接部にすばやく密着し、漏れを防ぎます
- 高いタック力は、山型の腹壁、深い皺、臍部などにも、浮き上がりを防ぎ密着します

スーパースリムフィット構造

薄さと密着性を両立した、
皮膚保護剤辺縁部

- 薄さと密着性の高さは、辺縁部の捲れ上がりを防ぎます
- 薄さを生かし、身体の動きに対しても高い追従性を発揮します
- 面板外縁断端の摩擦から、皮膚を守ります



肌への優しさと耐久性

2つのメリットを兼ね備えた
皮膚保護剤

- 水様便への高い耐久性を実現します (SIS配合、膨潤型)
- 保護剤の膨潤により、水様便の皮膚への付着を防ぎます
- 皮膚刺激性を抑え、着け心地の良さも両立した皮膚保護剤です

簡便な操作性とお使いになる方の立場に立って それぞれに工夫、開発された 様々な特長のストーマ袋ラインアップ。



消化管用

セーフシール排出口

気密性と耐久性に優れたセーフシール排出口を採用。排出口を留めるためのフラップを排出口の上部に配置。内寸が約60mmなので、コロストミーの方のみならずイレオストミーの方にも、しほり出しやすい排出口です。

消臭フィルター

ガスを透過させ、液体を通さないメンブレン採用の消臭フィルターが、バレーニング※を軽減します。
※ガスがストーマ袋内に溜まり膨らむこと。

フィルター保護構造

ストーマ袋の中を多層構造化し、便汁からフィルターを保護します。ストーマ袋の中に仕切りのフィルムが1枚あり、S字の切れ込みからガスが通過します。

スリット（観察窓）

ストーマを観察しながら装具貼付が可能です。貼付後もストーマや排泄物の状態を確認できます。

不織布

ストーマ袋の両面に、やわらかく撥水性の不織布を採用。

ベルトタブ

より固定力が必要な際は、ベルト装着が可能です。装具の安定した装着感を高め、安心感を提供します。アクティブな方にもおすすめです。



尿路用

逆流防止弁

ストーマ袋内の尿がストーマに向かって逆流せず、逆行性感染を防止します。
※尿路用ストーマ袋のみ採用。

スリット（観察窓）

ストーマを観察しながら装具貼付が可能です。貼付後もストーマや排泄物の状態を確認できます。

不織布

ストーマ袋の両面に、やわらかく撥水性の不織布を採用。

ベルトタブ

より固定力が必要な際は、ベルト装着が可能です。装具の安定した装着感を高め、安心感を提供します。アクティブな方にもおすすめです。



イレオストミー用

イレオストミーに適した キャップ式排出口の4つの利点

やわらかく大口径の排出口で、廃棄が簡単にできます。厚みがあり、くびれた形状のキャップは、手指巧緻性に不安のある方でも容易にお使いいただけます。キャップの付け根が排出口から離れているので、処理の際も衛生的です。

消臭フィルター

ガスを透過させ、液体を通さないメンブレン採用の消臭フィルターが、バレーニング※を軽減します。
※ガスがストーマ袋内に溜まり膨らむこと。

フィルター保護構造

ストーマ袋の中を多層構造化し、便汁からフィルターを保護します。ストーマ袋の中に仕切りのフィルムが1枚あり、C字の切れ込みからガスが通過します。

スリット（観察窓）

ストーマを観察しながら装具貼付が可能です。貼付後もストーマや排泄物の状態を確認できます。

不織布

ストーマ袋の両面に、やわらかく撥水性の不織布を採用。

ベルトタブ

より固定力が必要な際は、ベルト装着が可能です。装具の安定した装着感を高め、安心感を提供します。アクティブな方にもおすすめです。

やわらか凸 シャロー シリーズ



術直後から退院後までの幅広い領域をカバー、安心の生活をサポート

術直後の管理

ストーマ近接部を軽く押さえることで、ケアにおける便や尿の漏れのリスクを低減します。

早期退院に向けて

浅い皺・くぼみを補正。追加補正などの手間を省くことのできるシンプルケアを実現します。

退院後の安心へ

ストーマや腹壁、また活動量など退院後の変化による“漏れの予防的ケア”に最適です。

エステーム™ やわらか凸 シャロー(消化管用)

凸型形状面板(分類:軟性凸面型面板)



カスタムカット(クリップ*2個付)

注文番号	色	初孔サイズ	ストーマサイズ	リングサイズ	入数	本体価格※
422365		10mm	28mmまで	S	10枚	8,000円
422364	肌色*1	15mm	40mmまで	M		
422363		20mm	47mmまで	L		

※非課税




プレカット(クリップ*2個付)

注文番号	色	既製孔サイズ	ストーマサイズ	リングサイズ	入数	本体価格※
422545		25mm	40mmまで	M	10枚	8,000円
422546		30mm	40mmまで	M		
422547	肌色*1	35mm	40mmまで	M		
422542		40mm	47mmまで	L		
422543		45mm	47mmまで	L		

※非課税



貼付日数の目安

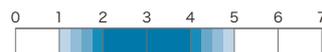

●排泄物の性状や発汗量により変化します。

*1:スリット(観察窓)付き

*2:排出口をクリップで留めたい場合に使用ください。

やわらか凸 シャロー イレオ

凸形状面板(分類:軟性凸面型面板)



カスタムカット(クリップ*2個付)

注文番号	色	初孔サイズ	ストーマサイズ	リングサイズ	入数	本体価格※
423513		10mm	28mmまで	S	10枚	7,800円
423512	肌色*1	15mm	40mmまで	M		
423511		20mm	47mmまで	L		

※非課税




プレカット(クリップ*2個付)

注文番号	色	既製孔サイズ	ストーマサイズ	リングサイズ	入数	本体価格※
423516		25mm	40mmまで	M	10枚	7,800円
423517		30mm	40mmまで	M		
423518	肌色*1	35mm	40mmまで	M		
423514		40mm	47mmまで	L		
423515		45mm	47mmまで	L		

※非課税



貼付日数の目安

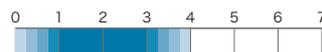

●排泄物の性状や発汗量により変化します。

*1:スリット(観察窓)付き

*2:排出口をクリップで留めたい場合に使用ください。

エステーム™

やわらか凸 シャロー ウロ(尿路用)

凸型形状面板(分類:軟性凸面型面板)



カスタムカット(アダプター*3 2個付)

注文番号	色	初孔サイズ	ストーマサイズ	リングサイズ	入数	本体価格※
422551	肌色*1	20mm	47mmまで	L	10枚	9,500円

※非課税




プレカット(アダプター*3 2個付)

注文番号	色	既製孔サイズ	ストーマサイズ	リングサイズ	入数	本体価格※
422563		15mm	28mmまで	S		
422564		20mm	28mmまで	S		
422565	肌色*1	25mm	28mmまで	S	10枚	9,500円
422560		30mm	40mmまで	M		
422561		35mm	40mmまで	M		

※非課税



貼付日数の目安

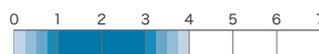

●排泄物の性状や発汗量により変化します。

*1:スリット(観察窓)付き

*3:導尿管などに接続する際に必要です。通常は使用しません。

やわらか凸 シリーズ



やわらかさは「快適」のために、コシは「安心」のために

やわらかいのに
コシがある

▶ 体の動きに追従する

▶ 違和感がない

▶ 近接部を押さえて
漏れを防ぐ

▶ 安心

やわらか凸の特有のコシが、ストーマ近接部を押さえて漏れを防ぎ、漏れの不安を解消します

エステーム™ やわらか凸(消化管用)

軟性凸面型面板



カスタムカット(クリップ*2 1個付)

注文番号	色	初孔サイズ	ストーマサイズ	リングサイズ	入数	本体価格*
421619		20mm	30mmまで	M	10枚	8,500円
421615	肌色*1	20mm	40mmまで	L		
422159		20mm	55mmまで	XL		

※非課税




プレカット(クリップ*2 1個付)

注文番号	色	既製孔サイズ	ストーマサイズ	リングサイズ	入数	本体価格*
421621		30mm	30mmまで	M	10枚	8,500円
421617	肌色*1	30mm	40mmまで	L		
421618		35mm	40mmまで	L		

※非課税



貼付日数の目安

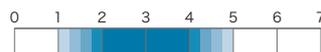

●排泄物の性状や発汗量により変化します。

*1: スリット(観察窓)付き

*2: 排出口をクリップで留めたい場合に使用ください。

やわらか凸 イレオ

軟性凸面型面板




カスタムカット(クリップ*21個付)

注文番号	色	初孔サイズ	ストーマサイズ	リングサイズ	入数	本体価格※
421937		15mm	20mmまで	S		
421936	肌色*1	15mm	30mmまで	M	10枚	7,800円
421935		15mm	40mmまで	L		

※非課税



貼付日数の目安

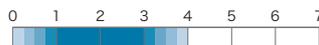

●排泄物の性状や発汗量により変化します。

*1: スリット(観察窓)付き

*2: 排出口をクリップで留めたい場合に使用ください。

エステーム™ やわらか凸 ウロ(尿路用)

軟性凸面型面板



カスタムカット(アダプター*32個付)

注文番号	色	初孔サイズ	ストーマサイズ	リングサイズ	入数	本体価格※
421628		10mm	18mmまで	S		
421626	肌色*1	10mm	30mmまで	M	10枚	10,000円
421623		10mm	40mmまで	L		

※非課税



フレカット 軟性凸面型 やわらか皮膚保護型



フィルターなし ベルト対応

フレカット(アダプター*32個付)

注文番号	色	既製孔サイズ	ストーマサイズ	リングサイズ	入数	本体価格※
421625	肌色*1	20mm	40mmまで	L	10枚	10,000円

※非課税




フレカット 軟性凸面型 やわらか皮膚保護型



フィルターなし ベルト対応

貼付日数の目安

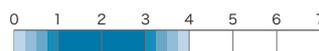

●排泄物の性状や発汗量により変化します。

*1:スリット(観察窓)付き

*3:導尿バッグなどに接続する際に必要です。通常は使用しません。

やわらか平面 イレオ

平面型面板



平面
タイプ


カスタムカット(クリップ*2 1個付)

注文番号	色	初孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格※
421934	肌色*1	20mm	60mmまで	10枚	7,000円



※非課税

貼付日数の目安

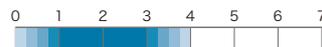

*1: スリット(観察窓)付き

*2: 排出口をクリップで留めたい場合に使用ください。



よりそい、つなぐ



医療と地域社会をつなぐ
地域社会と生活をつなぐ
生活と人をつなぐ



『コンバテッククラブ』は、ストーマ保有者と支援者の方々によりそいサポートすることを目的とした会員制のコミュニティークラブです。様々なサービスを通して皆さまのストーマライフを応援いたします。

入会費・年会費無料

コンバテック以外の装具をご使用の方も、ご入会いただけます。



- 1) ストーマ・排泄リハビリテーション学会用語集 第4版. 日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会編. 東京, 金原出版. 2020. p151, 164-165.
- 2) 吉川隆造. 最近の皮膚保護剤について組成的分類表の作成. 日本ストーマ・排泄リハビリテーション会誌. Vol.23, No.2, Jun. 2007, p.3-7.



 ConvaTec



よりそい、つなぐ
コンバテック ジャパン株式会社

お客様相談窓口

 0120-532384
<http://www.convatec.com>